

Cavios®

Matériau photopolymérisable pour base a fond de cavite.

Avantages

- * Cavios est un matériau photopolymérise pour doublage au cavité contenant de l'uréthane diméthacrylate et du phosphate tricalcique (α -TCP)
- * L' α -TCP présente une excellente compatibilité avec les tissus durs.
- * Application simple et rapide.
- * Seringue pratique permettant un recouvrement direct, aucun instrument requis.
- * Pâte pré-mélangée à optimale des propriétés de manipulation.
- * Aucun mordantage requis.
- * Excellent radio-opacité.



Données techniques

TEMPS DE PRISE	20 secondes
PROFONDEUR DE POLYMÉRISATION	2.5 mm
RÉSISTANCE À LA FLEXION	50 MPa
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	165 MPa

Fait par
Neo Dental Chemical Prod., Co Ltd.
Tokyo, Japan



Neo Dental International Inc.

2505 S. 320th ST Suite 625
Federal Way, WA 98003, USA

Tel: +1 253 946 0814
Fax: +1 253 946 0885
www.neodental-intl.com
ndi@neodental-intl.com

Mode d'emploi:

1. Après la préparation de la cavité, rincer et assécher la cavité.
2. Dans les cas où la pulpe est exposée, un fond de protection à l'hydroxyde de calcium doit être appliqué.
3. Installer l'embout jetable.
4. Aligner directement le fond de cavité avec Cavios.
5. Polymériser pendant 20 secondes. Lors du recouvrement d'une grande zone, augmenter le temps de prise.
6. Lorsque la cavité est profonde, appliquer une couche à tous les 0.5 mm en utilisant la technique d'application en couches.
7. Si Cavios est placé sous la restauration provisoire à base de résine (Evadyne), utiliser Sepalite afin d'éviter la liaison entre Cavios (fond) et Evadyne. Sepalite assure qu'Evadyne peut être retiré sans détruire le fond de cavité à base de résine.
8. Après l'application, jeter l'embout et remettre le bouchon sur la seringue.

Avertissements


- Ne pas utiliser Cavios sur des patients souffrant d'allergies ou d'irritation à Cavios, ou contre la résine méthacrylate. Si une irritation survient, cesser l'utilisation et consulter un médecin.
- Cavios ne devrait pas entrer en contact avec les tissus mous de la bouche, la peau, ou les yeux. Si un contact survient, rincer immédiatement à l'eau ou à la solution saline et consulter un médecin.
- N'utiliser Cavios que dans les conditions prescrites.

Entreposage

- Éviter les rayons directs du soleil.
- L'entreposage de Cavios dans un endroit frais prolonge sa durée de vie.
- La date de péremption apparaît sur l'emballage.

Conditionnement

Seringue 1.8g + 15 embouts

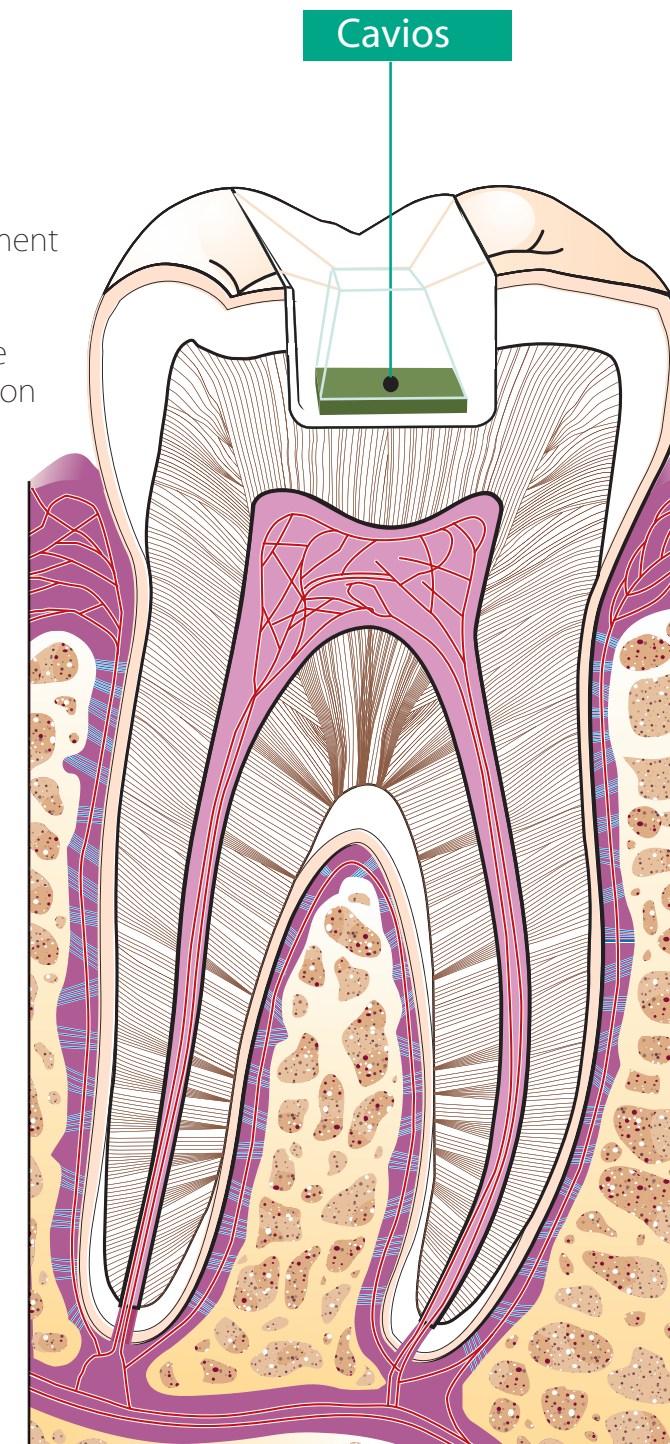

Distribué par
Neo Dental International, Inc. USA.